

手術用手洗装置

# ステンレス製手洗シンク

TCSシリーズ〈水道水対応〉

Pollution Control



東洋紡エンジニアリング(株)製の手洗シンクは、術者の方が安心してご使用いただけますよう安全対策、外部からの汚染防止を考慮しています。  
自動運転方式ですので、日常の面倒な機器操作は必要ありません。



東洋紡エンジニアリング株式会社

## 搭載機構

- ミキシングバルブ
- 鉄さび・粒子を除去するプレフィルター
- 逆汚染防止機構 (UV 式)  
シャワー内部に紫外線を照射して付着した浮遊菌の繁殖を防ぎます。
- 4時間毎に1分間シャワー口より出水させて水道水中の残留塩素が消失する前に水を入れ替えます。(定時出水機構)
- 漏水センサー  
万が一の手洗シンク内漏水時給水電磁弁を自動停止します。




## オプション



バリア・ワイパー装着例(オプション)

## 外形寸法

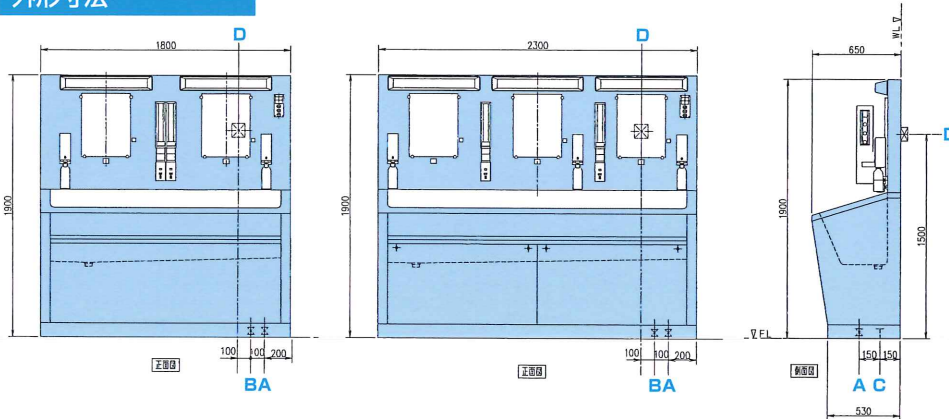

- A 給水 15A FL+100 バルブ止
- B 給湯 15A FL+100 バルブ止
- C 排水 40A FL+100 プラグ止
- D 電源 AC100V単相 FL+1500 アース付コンセント(15A用)

## 基本仕様

型 式	TCS-T-2	TCS-T-3
手 洗 数	2人用	3人用
外形寸法(W×D×H)	1800×650×1900	2300×650×1900
プレフィルター(μm)	5	
出 水 方 式	センサースイッチ方式	
逆汚染防止シャワー	5W 紫外線殺菌 (UV式)	
ソープコンテナ	2台 センサースイッチ方式	3台 センサースイッチ方式
ブラシケース	1列用 2台 センサースイッチ方式	
給水・給湯管径	各 15Aバルブ止FL+100 (給水:水道水/給湯:約60℃)	
給水・給湯圧力	各 0.15~0.3MPa	
排水管径	40Aプラグ止FL+100	
電 源	100V 200VA	100V 300VA
製品重量/運転重量	80kg / 85kg	100kg / 105kg

※ 給水圧力不足 (0.15MPa以下) の場合はオプションで加圧ポンプを設置致します。  
 ※ 給水圧力が高い (0.3MPa以上) の場合にはオプションで減圧弁を設置致します。  
 ※ 製品 (運転) 重量・電源はオプション機器取付により変わります。

※ 飲料水として使用しないこと。  
 ※ ご使用時には取扱説明書をお読み下さい。  
 ※ 据付費は別途お見積り致します。

※ 仕様及び外観など性能向上により予告なく変更する場合があります。

## 製造発売元

**TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社** メディカル事業部

大阪本社 大阪市北区堂島2丁目1-16 フジタ東洋紡ビル  
 TEL: 06-6348-3357 FAX: 06-6348-9455  
 東京 TEL: 03-5824-0177 FAX: 03-5824-0175  
 仙台 TEL: 022-217-0152 FAX: 022-217-0153  
 高松 TEL: 087-814-9680 FAX: 087-814-9681  
 広島 TEL: 082-543-5571 FAX: 082-246-0016  
 福岡 TEL: 092-574-8781 FAX: 092-574-8782  
 東京テクニカルセンター TEL: 03-5824-0177 FAX: 03-5824-0175  
 大阪テクニカルセンター TEL: 0725-32-0246 FAX: 0725-32-0255  
 (医療機器 製造工場/大阪テクニカルセンター)

## 代理店・取扱店

<http://www.toyobo-eng.co.jp>



ISOは大坂テクニカルセンター取得